

# Dcont®

## ETALON



- / SZÍNES LED VISSZAJELZÉS
- / KÖNNYŰ KEZELHETŐSÉG
- / EGYÉNRE ALAKÍTHATÓ BEÁLLÍTÁSOK

# GENERÁCIÓKON ÁT

Dcont®  
Diabetes Control



## VÉRCUKORMÉRŐ ÖNELLENŐRZÉSÉHEZ

A Dcont® ETALON készülék  
az ETALON Teszt tesztsíkkal  
használható!



A Dcont® ETALON vércukormérő és az ETALON Teszt tesztsík gyógyszeripari segédeszközök.

# Dcont®

Diabetes Control

## ÖN MEGHATÁROZHATJA



/ A betege számára legideálisabb célértéktartományokat

/ Mikor mérje betege a vércukrát

/ Hipoglikémiás érték után mikor mérjen ismét a betege

/ Hogy betege jelölje az étkezés, illetve az inzulinadás időpontját!

Etalon Teszt tesztcsik (50 db): Közfinanszírozás alapján elfogadott ár: 2.577,- Ft + 5% Áfa; Támogatás összege: 2.062,- Ft + 5% Áfa; Térítési díj: 515,- Ft + 5% Áfa





### / VÉRFELSZÍVÁS A CSÍK TELJES VÉGÉN

Kisebb csík, nagyobb vérfelszívási felület!  
A vérfelszívás a tesztcsíк teljes végén, nem kell „célozni” a vércseppel



### / HIPOGLIKÉMIA UTÁN ISMÉTELT MÉRÉSRE TÖRTÉNŐ FIGYELMEZTETÉS

Hipoglikémia után a készülék képes arra, hogy az ismételt mérés szükségességét automatikusan jelezzék



### / KEZELÉSI CÉLÉRTÉK SZERINTI SZÍNES LED VISSZAJELZÉS

A hipoglikémiás, a jól kontrollált, ill. a hiperglikémiás tartomány határát egyénre szabottan be lehet állítani. A vércukormérő ez alapján vizuális jelzést ad betegének



### / AZ ÉTKEZÉS, AZ INZULINADÁS IDŐPONTJÁNAK RÖGZÍTÉSE

A Dcont® ETALON egyszerűen képes rögzíteni az étkezés vagy az inzulinadás időpontját. Ezek később az eNAPLÓ elemzése során nagyban segíthetik a terápia eredményeinek értékelését




### / ÉTKEZÉS UTÁNI VÉRCUKORMÉRÉS IDŐPONTJÁNAK BEÁLLÍTÁSA

Az étkezés előtti (jelölt) mérést követően 1 / 1,5 / 2 órával a Dcont® ETALON hangjelzéssel figyelmeztet az étkezés utáni mérés esedékességére



### / ÉHOMI / ÉTKEZÉS ELŐTTI ÉS ÉTKEZÉS UTÁNI VÉRCUKORMÉRÉSI EREDMÉNYEK JELÖLÉSÉNEK TÁMOGATÁSA

A jelölők automatikus villogással hívják fel a beteg figyelmét használatukra, így egyszerűen rögzíthetők

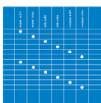

### / BEÁLLÍTHATÓ ÖNELLENŐRZÉSI RENDSZER

Az eNapló felületen Ön vagy orvosszakmai útmutatása alapján a beteg beállíthatja, hogy mikor esedékes a vércukormérés, melyre a Dcont® ETALON hangjelzéssel figyelmeztet\*


\*A Dcont® eNAPLÓ szoftver és a Dcont® mobilalkalmazás független termékek, elérhetőségükkel kapcsolatban érdeklődjön vevőszolgálatunknál vagy a [www.dcont.hu](http://www.dcont.hu) weboldalon



HbA1c tartomány becslése



személyre szabható figyelmeztetések

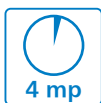


gyors eredmény 4 mp



vérvételi hely megvilágítás



USB csatlakozás

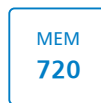


nagy memória 720 eredmény



hipoglikémiái eseményszám becslése

# Dcont® ETALON vércukormérő rendszer összehasonlítása labor referenciával 600 mérés adatai alapján.

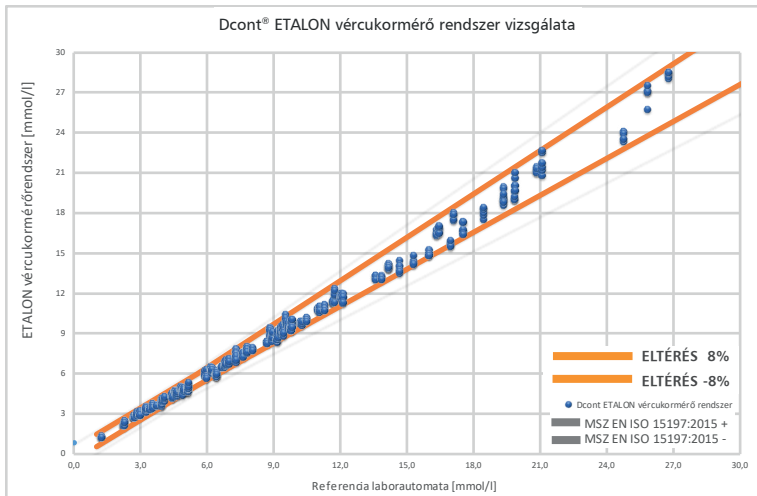

## TECHNIKAI PARAMÉTEREK

MÉRÉSI ELV:	bioszenzor
VÉRMINTA:	0,6 µl kapilláris teljes vér
MÉRÉSI TARTOMÁNY:	0,6 – 33,3 mmol/l
KIJELZÉS:	0,6 mmol/l alatt: Lo 33,3 mmol/l fölött: Hi
MÉRÉSI IDŐ:	4 másodperc
MEMÓRIA MÉRETE:	720 adat
KIJELZŐ:	folyadékkristályos kijelző (LCD)
AUTOMATIKUS KIKAPCSOLÁS:	90 másodperc után
INTERFÉSZ:	USB interfész
ELEMEK:	2 darab 3V-os elem (CR2032)
ELEMEK ÉLETTARTAMA:	1000 mérés, vagy egy év
MŰKÖDÉSI HŐMÉRSÉKLET:	4 – 45 °C
TÁROLÁSI HŐMÉRSÉKLET:	-20-(+50) °C
MŰKÖDÉSI ÉS TÁROLÁSI PÁRATARTALOM:	10-90% RH
MÉRET:	100 X 58 X 20 MM
TÖMEG:	~ 71g (elemekkel)
A Dcont® ETALON vércukormérő, az ETALON TESZT Tesztsík gyógyászati segédeszköz.	

Dcont® | ETALON



Gyártó és forgalmazó:

**77 ELEKTRONIKA Kft.**

/ H-1116 Budapest, Fehérvári út 98.

/ ZÖLD SZÁM: 06 80 27 77 77 / TEL.: 06 1 206 1480

/ EMAIL: [ugyfelszolgalat@e77.hu](mailto:ugyfelszolgalat@e77.hu) / [www.dcont.hu/](http://www.dcont.hu/)

[www.e77.hu](http://www.e77.hu)

D71-9301-6

Lezárás dátuma:

2021.12.08. DC202112081